

Terra Hospital

21650 Bij het Terra Hospital bed gaan veiligheid en comfort hand in hand. Een ultra lage bedpositie van 18 cm beperkt het valrisico en een ergonomische werkhoogte van 83 cm garandeert een efficiënte zorg.

Onderwagen

- Uiterst stabiele hoog/laag verstelling d.m.v. draagarmen.
- Trendelenburg en anti-Trendelenburg verstelling tot $\pm 16^\circ$.
- Open onderwagen verhoogt het reinigingsgemak.
- Wielen $\varnothing 100$ mm, 2 aan 2 geremd met behulp van een rembeugel.
- Bed is verplaatsbaar in iedere positie behalve in de laagste positie.
- Richtingswielen aan hoofdzijde

Ligvlak

- Drie- of vierdelig (*) ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie.
- Rugverstelling met tussenstop bij een inclinatie van 30° . (indien uitgerust met een snelverstelling)
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 34^\circ$ (indien 4-delig).
- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie (indien 4-delig).
- Beensteun manueel verstelbaar tot $\pm 14^\circ$ (indien 3-delig).
- Een telescopische beveiliging van de rugsteun vermijdt inklemmingsgevaar van de patiënt tijdens inclinatie.
- De rugsteun is voorzien van een inclinatie indicator.
- De elektrische manipulatie van de ligvlakdelen is voorzien van een klembeveiliging.
- Ligvlak uit stalen ligvlakprofielen.
- Ligvlak met uitneembare volkunststof ligvlakdelen (*).
- Het ligvlak is voorzien van openingen voor fixatieriemen en ventilatie-openingen.
- Rug- en voetensteun voorzien van 4 kunststof matrashouders.
- Telescopische bedverlenging tot 20 cm.
- Geïntegreerd stootwiel aan 4 bedhoeken.
- Bevestigingschulzen voor serumhouder of bedgalg aan 4 bedhoeken.
- Afgeronde hoeken ter verhoging van passieve veiligheid.

Elektrische bedmanipulaties

- De elektrische functies kunnen geactiveerd worden d.m.v. een handschakelaar.
- Volgende manipulaties zijn mogelijk via een toetsencombinatie op de handbediening
 - Trendelenburgpositie
 - Vergrendeling/ontgrendeling (na 3 sec.)
 - CPR
 - Persoonlijk in te stellen transporthoogte
- De handbediening is voorzien van een voorgeprogrammeerde slaapfunctie en relaxfunctie.
- "legs-up" positie: voetzijde 10 cm hoger dan hoofdzijde.
- De optionele handschakelaar met selectieve blokkering (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen d.m.v. een magneetsleutel.
- Sturing met Bluetooth (*) voor draadloze diagnostische motor analyse en draadloze bediening.

Paneeltypes

- Vela (standaard)
- Jaro*
- Prime*

Onrusthekkens

- Twin (*)
- Trix (*)
- Atmosphere (*)

Accessoires


Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100 cm¹, Lengte: 212 cm
- Hoogte-variantie ligvlak:
 - metalen ligvlak: 17,5 - 82,5 cm
 - volkunststof ligvlak (*): 18 - 83 cm
- Veilig gewicht: 230 kg
- Gewicht (zonder opties): 140 kg
- Ligvlakmaat: 202 x 86 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm
- Stand-by verbruik: 0,5 W (max. 4,38 kWh/jaar).

¹ Breedte (met Jaro panelen): +2 cm

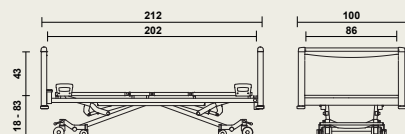

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal.
- Volkunststof.
- Epoxy-coating RAL 9006 alu.
- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verdere info over de gebruikte materialen en constructie: zie onze materialenfiches.
Voor kleuren: zie ons uitgebreid gamma.

Opties

- Elektrische beschermingsklasse I.
- 4-delig ligvlak.
- Ligvlak met volkunststof ligvlakdelen.
- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Muurafstandhouder.
- (Elektro-)mechanische snelverstelling (CPR).
- Verlichte handschakelaar.
- Handschakelaar met selectieve blokkering (incl. Trendelenburg).
- Sturing met Bluetooth.
- Draadloze handbediening voor sturing met Bluetooth (indien vierdelig ligvlak).
- Draadloze handbediening.
- Leeslamp.
- Batterij.
- Accessoire rail + 3 haken aan beide zijden.
- Andere ligvlakbreedtes: 90 cm
- Zuurstoffleshouder ($\varnothing 147$ mm, H 222 mm)

(*) Optie



HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.