

Velino Care

08557 Het Velino verpleegbed is een in de hoogte regelbaar multifunctioneel zuilenbed dat het comfort voor de patiënt en het gebruiksgemak maximaliseert.

Onderwagen

- Hoog/laag verstelling door middel van 2 telescopische zuilen.
- Anti-Trendelenburg verstelling mogelijk tot $\pm 14^\circ$.
- Verborgen wielen d.m.v. een kunststof afdekkap in houtstructuur of grijze unikleur.
- Tweelingwielen \varnothing 50 mm, 2 per 2 geremd.
- Design rempedaal gemakkelijk bereikbaar aan elke zijde.
- De volledig open onderwagen verhoogt toegankelijkheid en reinigingsgemak.

Ligvlak

- Drie- of vierdelig (*) ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie.
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 34^\circ$ (indien 4-delig).
- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie (indien 4-delig).
- Beensteun manueel verstelbaar tot $\pm 14^\circ$ (indien 3-delig).
- Elektrische manipulaties van de ligvlakdelen voorzien van klembeveiliging.
- Ligvlak bestaat uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.
- Standaard voorzien van openingen voor fixatieriemen.
- Rug- en voetensteun voorzien van geïntegreerde matrashouders.
- Telescopische bedverlenging tot 20 cm (niet mogelijk bij Pollux onrusthekkens).
- Hoofdzijde voorzien van 2 bevestigingshulzen voor serumhouder of bedgalg.
- Afwezigheid van zichtbare bevestigingsbouten voor voetpaneel.
- Bedpanelen in massieve ovengedroogde beuk (*).
- Afgeronde hoeken ter verhoging van passieve veiligheid.

Elektrische bedmanipulaties

- Alle elektrische bedmanipulaties gebeuren d.m.v. onderhoudsvrije Linakmotoren.
- De ligvlakmotoren worden standaard uitgerust met een klembeveiliging en zijn zonder gereedschap vervangbaar.
- De elektrische bedfuncties kunnen geactiveerd worden d.m.v. een handschakelaar of *mini-verpleegbox* (*).
- De handbediening is voorzien van een voorgeprogrammeerde slaap- en relaxfunctie.
- Een *mini-verpleegbox* (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen terwijl een vergrendeldoos (*) deze d.m.v. 1 knop volledig uitschakelt.

Paneeltypes

- Midea (standaard)
- Valentino (*)
- Felina (*)
- Puro (*)

Onrusthekkens

- Pollux (*)
- Trix (*)


Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100,5 cm, Lengte: 208 cm
- Hoogte-variatie ligvlak: $\pm 40,5$ cm - $\pm 80,5$ cm
- Veilig gewicht: 250 kg
- Gewicht (zonder opties): 140 kg
- Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm
- Stand-by verbruik: 0,5 W (max. 4,38 kWh/jaar).

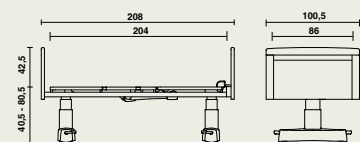

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Beuk (massief, fineer), spaanplaat (gemelamineerd).
- Metaal: epoxy-coating RAL 9006 alu
- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen** en **constructie**: zie onze materialenfiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- 4- delig stalen ligvlak.
- 3- of 4- delig ligvlak met geperforeerde, uitneembare volkunststofplaten.
- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Paneeltype Puro, Felina of Valentino.
- Stootwielen (niet mogelijk op Midea).
- Muurafstandhouder.
- Onrusthekkens.
- Vergrendeldoos (ACL).
- Mini-verpleegbox (ACC).
- Handschakelaar met selectieve blokkering.
- Nachtticht onder bed.
- Houten ombouw aan ligkader.
- Accessoirehaakjes.
- Batterij.
- Manuele snelverstelling (CPR).
- Dekkenrek.
- Zuurstoffeshouder (\varnothing 147mm, H 222 mm)

(*) Optie

