

Vico Care

08750 Le lit de soins Vico combine une technologie éprouvée et un charme de matériau naturel. Un maximum de stabilité, de flexibilité et de sécurité est garanti grâce au réglage hydraulique de la hauteur variable.

Chariot

- Réglage hauteur variable hydraulique à l'aide de bras de support.
- Couvercle de recouvrement en matière synthétique (*).
- Position Trendelenburg réglage jusqu'à $\pm 12^\circ$ (*).
- Position Anti-Trendelenburg réglage jusqu'à $\pm 13^\circ$ (*).
- Roues design Ø 125 mm, freinage roue par roue.
- Pédale design servant à l'activation du mécanisme central de frein (*).

Sommier

- Trois ou quatre plans (*) de couchage.
- Relève-buste réglable jusqu'à $\pm 70^\circ$ avec autorégression à l'aide d'un vérin à gaz.
- Plicature-genoux réglable jusqu'à $\pm 34^\circ$ à l'aide d'un vérin à gaz (si quatre plans).
- Repose-jambes ou repose-pieds réglable manuellement.
- Sommier fait de lattes profilées arrondies, en acier.
- Plaques du sommier amovibles en stratifié massif 6 mm (*).
- Relève-buste et repose-pieds équipés de deux retenues de matelas en matière synthétique.
- Rallonge de lit télescopique jusqu'à + 20 cm.
- Rallonge du sommier jusqu'à + 20 cm (*).
- Deux coins du lit, à la tête du lit, équipés de douilles, pour porte-sérum ou potence de lit.
- Absence de boulons de fixation visible pour le panneau pieds.
- Panneaux de lit en hêtre massif (*).
- Coins du lit arrondis pour l'augmentation de la sécurité passive.

Manipulations du lit

- La hauteur du lit peut être réglée à l'aide de pédales aux deux côtés du lit.
- La position Trendelenburg peut être activée par la pédale au pied du lit (*).
- Le relève-buste et la plicature-genoux peuvent être réglés par un levier aux deux côtés du lit.

Panneaux

- Midea (standard)
- Valentino (*)
- Puro (*)
- Felina (*)

Galleries de protection Accessoires

- Pollux (*)
- Trix (*)
- Atmosphère (*)

Nous référons à notre liste d'accessoires.


(*) Option



Dimensions et prestations

- Largeur : 100,5 cm, Longueur : 208 cm
- Variation de la hauteur du sommier¹ : ± 41 cm - ± 80 cm
- Charge dynamique sécuritaire : 200 kg
- Poids (hors extensions) : 115 kg
- Dimensions du sommier : 204 x 86 cm
- Dimensions matelas : 195 x 85 cm, épaisseur : 12 à 15 cm

¹ Configuration standard

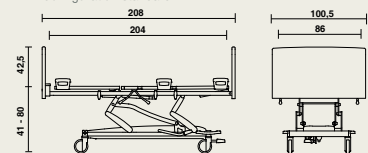

Matériel utilisé et finition

- Bois : Hêtre (massive, contre-plaqué), en aggloméré (mélaminé).
- Métal : revêtement époxy RAL 9006 alu Blanc.
- Charnières en matière synthétique autolubrifiantes.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** : voir nos fiches matériaux.
Pour **les couleurs** : voir notre large gamme.

Options

- Sommier en 4 parties.
- Sommier avec panneaux amovibles en matière synthétique.
- Rallonge du repose-pieds jusqu'à 20 cm.
- Types de panneaux : Puro, Felina ou Valentino.
- Butoirs (pas possible en combinaison avec Midea).
- Protection murale.
- Galeries de protection.
- Pédale (anti-) Trendelenburg.
- Couvercle de recouvrement.
- Lattes en bois pour cadre de lit.
- Bande décorative (profil avant et arrière du chariot).
- Crochets pour accessoires.
- Roues Integral S Ø 125 mm ou Ø 150 mm sur roulement à billes de précision, freinage central.
- Roulettes dissimulées Ø 50 mm, freinage central.
- Porte-couvertures.
- Support pour bouteille d'oxygène (Ø 147mm, H222 mm)

