

Domus Classic Soft

07597 In aller Seelenruhe und Gemütlichkeit optimalen Sitzkomfort genießen: Das ist der Kerngedanke des Domus Ruhesessels. Der Classic Mechanismus lässt sich ganz einfach einstellen, indem man sich ein wenig vom Stuhl abstößt und das ganz ohne Hebel. Die optionale "Raising & Sitting Assist" bietet ergonomische Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen dank der unterstützenden Bewegung der Sitzfläche.

Gestell

- Die abgerundeten Seitenteile sind aus 2 OSB-Platten (Dicke: 30 mm) hergestellt und mittels ein Stahlkonstruktion stark mit einander verbunden.
- Die Seitenteile sind komplett mit feuerhemmendem Schaum und doppelter Steppnaht gepolstert.
- Komfortable breite Armlehnen von ± 10 cm.
- Alle Seiten und Ecken sind abgerundet.
- Keine sichtbare Befestigungspunkte.
- Beine aus massiven Buchenholz, mit Gleitern aus Kunststoff ausgestattet.

Sitz

- Abnehmbarer Sitz in melaminharzbeschichteter MDF-Platte, Dicke 12 mm.
- Der abgerundete Sitz vorn behindert den Blutkreislauf nicht.
- Komfortable Sitzhöhe (44 cm)
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. 2 Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Komplett gepolstert mit doppelter Steppnaht.

Rückenlehne und Beinstütze

- Ergonomisch vorgeformte Schale aus Schichtholz, Dicke 12 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. 3 Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Komplett gepolstert mit doppelter Steppnaht.
- Beinstütze: Schichtholz, Dicke 10 mm und mit feuerhemmendem Schaum gepolstert.

Classic Mechanismus

- Einfache Verstellung in 3 Positionen: Sitzposition, Leseposition und Relaxposition.
- Der Relaxmechanismus hebt zuerst die Beine auf. Danach wird es möglich, den ganzen Sessel weiter zu kippen.
- Einfache Verstellmöglichkeiten.
- Verstellbar ohne Hebelmanipulation.
- Optimaler Sitzkomfort in jeder Position, dank des konstanten Winkels zwischen Rückenlehne und Sitz während des Kippens.
- Optimale Beinunterstützung dank der teleskopischer Beinstütze.
- In der Sitzposition ist die Beinstütze zur Förderung des Aufstehens nach innen gekippt.

Farben


Bitten Sie uns um unser reichhaltiges Angebot an Farben.
Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.



Maße

07597 | Domus Classic Soft:

- B 75 x T 82 x H 122 cm
- Sitzhöhe: 44 cm
- Sitztiefe: 52 cm
- Sitzbreite: 53 cm
- Höhe der Armlehnen: 68 cm
- Sichere Arbeitslast : 135 kg

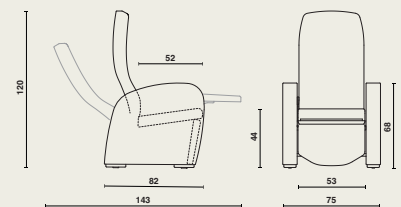

Materialien und Gestaltung

- Holz: Buche (massiv), Schichtholz, MDF-Platte, OSB-Platte.
- Metall: epoxybeschichtet (Schwarz).
- Feuerhemmender Schaum.
- Bezug: siehe Kollektion.
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien.

Optionen und Zubehör

- Sitzpolster mit einer Oberschicht aus 40 mm viskoelastischem Schaum und bi-elastischem Bezug.
- Anatomisches Reduktionskissen.
- Ohrenbacken.
- Fixationsbügel.
- Esstablethalter.
- (Hülse für) Infusionsständer Ø 19 mm.
- Versteckte Doppellaufrollen vom Ø 32 mm, hinten Ø 50 mm mit Bremse.
- Laufrollen Ø 100 mm mit Bremse.
- Laufrollen Ø 100 mm mit Bremse und Richtungsfeststeller.
- Ausziehbare Fußstütze aus Kunststoff (mit Laufrollen Ø 100 mm).
- Ergonomischer Schiebebügel aus Kunststoff an der Rückenlehne (mit Laufrollen Ø 100 mm).
- Abnehmbare und abstellbare Nackenkissen
- Abnehmbarer Kopfstütze.
- Raising & sitting assist.

