

# Fero houten E-move

**13605** De Fero relaxzetel met wielen is uitgerust met een elektrisch verstelbare been- en rugsteun, eenvoudig te bedienen door een intuïtieve handbediening.

## Onderstel

- 4 gelamelleerde beuken poten verbonden met massief beuken steunen.
- 2 gelamelleerde beuken armsteunen.
- Verlijmde pen-en-gat verbinding.
- Zijden zijn stevig verbonden d.m.v. een massief beuken dwarsregel en een stalen frame.
- Ergonomische knoparmliggers vergemakkelijken het in- en uitstappen.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- Comfortabele licht gebogen armsteunen van  $\pm 7,5$  cm breedte.
- 4 design tweelingwielen  $\varnothing 100$  mm met individuele rem.
- Voorzien van een ophanghaak voor handbediening aan rechterzijde (optioneel aan beide zijden).

## Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende densiteit voor optimaal zitcomfort.
- De bloeddorstroming wordt niet gehinderd dankzij de afgeronde voorzijde.
- Comfortabele zithoogte van 46 cm.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

## Rugsteun

- Bestaat uit een ergonomisch gevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.
- Ergonomische kunststof duwbeugel aan rugsteun.

## Beensteun

- Beensteun in multiplexplaat, dikte 10 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.

## E-move mechanisme

- Kantelt de rugsteun, zitting en beensteun tot in een 'zero gravity' positie (\*) door middel van 2 motoren.
- De rugsteun en beensteun zijn eveneens afzonderlijk verstelbaar.
- De hoek tussen zit en rugsteun varieert van  $103^\circ$  in zitpositie tot  $138^\circ$  in 'zero gravity' positie.
- Wanneer het relaxmechanisme van de rugsteun in werking treedt inclineert de zit tot  $23^\circ$ .
- De beensteun is in de zithouding naar binnen gekanteld ter bevordering van het opstaan.
- Optimale ondersteuning voor de benen dankzij telescopisch beensteun.
- De bediening gebeurt door een tactiele handschakelaar.

## Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.  
Staatkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

## Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze  
ruime accessoirelijst.


(\*) 'Zero gravity' positie: deze zit/lighouding is geïnspireerd op NASA-data over een neutrale lichaamspositie, die alle spierkrachten omzet tot een biomedisch evenwicht. Bron: "From outer space to you", Omni, March 1994.



## Afmetingen

**13605** | Houten relaxzetel met wielen E-move:

- B 68 x D 76-162 x H 125 cm
- Zithoogte: 46 cm
- Zitdiepte: 52 cm
- Zitbreedte: 53 cm
- Hoogte armsteunen: 67 cm
- Veilig werkgewicht: 135 kg

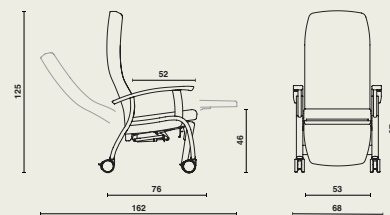

## Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Beuk (massief, gelamelleerd), Multiplex, MDF.
- Metaal: epoxy-coating (zwart).
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

## Opties

- Zitkussen met een toplaag in 40 mm viscoelastisch schuim en bi-elastische hoes (ook mogelijk op beensteun).
- Gestoffeerde wangen.
- Accessoirehaakjes.
- DIN rail.
- Fixatiebeugel.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Verstelbaar en afneembaar hoofd-/nekkussen.
- Serumhuls  $\varnothing 19$  of  $\varnothing 32$  mm.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Eettafelhouder op rug.
- Eettafelbevestiging.
- Houten poten zonder wielen.
- Geïntegreerde hulpwielen in achterste poten
- Tweelingwielen  $\varnothing 100$  mm met richtingswiel.
- Voetensteun (zithoogte = 51 cm).
- Beensteun met kunststof beschermhoes.
- Batterij 1800mAh of 4000mAh.

