

ZenSo Duo-line

20107 Der ZenSo Duo-line ist mit einem Relaxmechanismus ausgestattet, der speziell für den Pflegesektor entwickelt worden ist. Der Duo-line Mechanismus ermöglicht es, die Rückenlehne und Beinstütze separat zu verstellen.

Gestell

- Solide, geschweißte Metallkonstruktion, ausgestattet mit 2 Aufnahmehülsen für Infusionshalter (Ø 19 mm).
- Alle Seiten und Ecken sind abgerundet.
- 4 Linea Doppellaufrollen Ø 100 mm mit Richtungsfeststeller. Die Rollen sind mit einem zentralen Bremsmechanismus ausgestattet. Die Bremsen befinden sich zentral und an beiden Seiten
- des Sessels. Das Bremspedal kann an der Vorderseite des Sessels betätigt werden.
- Ausziehbare Fußstütze mit Kippenschutz aus Kunststoff und Antirutsch-Struktur.
- Die Design Schutzkappe ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung des Gestells.

Rückenlehne

- Ergonomisch vorgeformte Schale aus Schichtholz, Dicke 12 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. 2 Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Ergonomischer Schiebebügel aus Kunststoff.
- Völlig gepolsterte Rückenlehne mit doppelter Steppnaht.

Sitz und Beinstütze

- Sitz und Beinstütze aus einem Stück, leicht abnehmbar ohne Werkzeug.
- Sitz und Beinstütze in MDF-Platte, Dicke 12 mm, gepolstert mit feuerhemmendem Schaum mit 3D-Struktur für optimalen Sitzkomfort.
- Komplett gepolstert mit doppelter Steppnaht
- Der abgerundete Sitz vorn behindert den Blutkreislauf nicht.
- Optimale Beinunterstützung dank der teleskopischer Beinstütze (+70 mm), die auch Falten in der Polsterung verhindert.
- Sitzhöhe: freie Wahl (42,5 cm, 45 cm oder 47,5 cm)
- Wahl zwischen zwei verschiedenen Sitztiefen: 46 cm (small) oder 50 cm (large).

Höhenverstellbare Armlehnen

- Ergonomische Armlehnen erleichtern das Hinsetzen und Aufstehen.
- Essbrettbefestigungen gehören zur Standardausstattung.
- Höhenverstellbare Holzarmlehnen in 4 Positionen mittels 2 massiver Stahlachsen.
- Verriegelung nach unten, mittels eines Federhebels.
- In niedrigster Position auf gleicher Höhe mit der Sitzfläche.

Duo-line Mechanismus:

- Ermöglicht es, die Rückenlehne und Beinstütze separat zu verstellen. Die Rückenlehne kann mittels eines Hebels auf der rechten Seite geneigt werden. Die Beinstütze kann mittels eines Hebels auf der linken Seite geneigt werden.
- Verriegelung in jeder Position möglich.
- Der Sitz kippt bis zu 20 Grad, wenn der Relaxmechanismus betätigt wird.
- Die Gasfedern minimieren die benötigte Betätigungskraft des Mechanismus.

Farben

Bitten Sie uns um Unser reichhaltiges Angebot an Farben. Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.

Zubehör


Bitten Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.



Maße

ZenSo Duo-line:

- 68 x 71/151 cm
- Höhe: abhängig von der gewählten Rückenlehne
- Sichere Arbeitslast: 150 kg

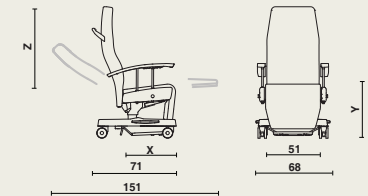

Sitztiefe X	Sitzhöhe Y*	Rückenlehne Z	Geeignet für Körpertyp
46 cm	42,5 cm	84 cm	< 164 cm
46 cm	45 cm	84 cm	164 - 176 cm
50 cm	45 cm	84 cm	
50 cm	47,5 cm	84 cm	> 176 cm

(*) Sitzhöhe gemessen ab Fußstütze

Materialien und Gestaltung

- Holz: Schichtholz, MDF-Platte.
- Metal: epoxybeschichtet (schwarz).
- Kunststoff.
- Feuerhemmender Schaum.
- Bezug: siehe Kollektion.
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien.

Optionen

- Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum und bi-elastischem Bezug.
- Anatomisches Reduktionskissen für Beinstütze.
- Das obere Rückenteil ist abnehmbar.
- Haken für Zubehör.
- Fixationsbügel
- Halter für Esstabelle auf der Rückseite.
- Raising & Sitting assist.
- Gepolsterten Seiten.
- Gepolsterten Seiten und Armlehnen aus Kunststoff oder Holz.
- Höhenverstellbare Holzarmlehnen.
- Antistatische Vorderrolle
- Aufnahmehülse für Infusionshalter Ø 32 mm auf beiden Seiten
- Aufnahmehülse für Infusionshalter Ø 32 mm auf der rechten Seite (Ø 19 mm auf der linken Seite)
- Sauerstoffflaschenhalter (Ø 147 mm, H 222 mm)

