

Nora

24007 Het Nora bed is een multifunctioneel en hedendaags zuilenbed. Met geïntegreerde veiligheidsfuncties en een focus op comfort, is het Nora bed een optimale keuze om aan de specifieke behoeften van patiënt en verpleegkundige te voldoen.

Onderwagen

- Stevig gelast metalen frame.
- Hoog/laag verstelling door middel van 2 telescopische zuilen.
- Trendelenburg en anti-Trendelenburg verstelling mogelijk tot $\pm 16^\circ$.
- Integral S wielen $\varnothing 150$ mm op precisiekogellagers met centraal remmechanisme.
- Kunststof designpedaal voor activering van het centraal remmechanisme of van de richtingsfixatie.
- Rempedaal toegankelijk in alle bedposities.
- Rempedaal met beugel aan voetenzijde (*) (niet mogelijk aan hoofdzijde).
- Rempedaal aan hoofdzijde (*).
- Rempedaal aan hoofdzijde en midden (*).
- Afwerking met kunststof afdekkap.
- De hoog/laag zuilen verhogen toegankelijkheid en reinigingsgemak.
- Vaste serumhouders op onderwagen (*).

Ligvlak

- Vierdelig ligvlak.
- Elektrische beschermingsklasse I (equipotentiaal).
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie.
- Rugverstelling met tussenstop bij een inclinatie van 30° .
- Rugsteun is voorzien van een inclinatie-indicator.
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 34^\circ$.
- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie.
- Elektrische manipulaties van de ligvlakdelen voorzien van klembeveiliging.
- Manuele snelverstelling van de rugsteun (CPR).
- Batterij (Li-Ion).
- Ligvlak met uitneembare, volkunststof ligvlakdelen voor reiniging en onderhoud.
- Standaard voorzien van versterkte openingen voor fixatieriem.
- Rug- en voetensteun voorzien van geïntegreerde matrashouders.
- Telescopische bedverlenging mogelijk tot 20 cm.
- 4 bedhoeken met geïntegreerd stootwiel.
- 4 bedhoeken zijn voorzien van bevestigingschulzen voor serumhouder of bedgalg.
- De bedpanelen bestaan uit een metalen frame (Jaro*) met een volkunststof inzetpaneel of uit kunststof (Prime*).
- Geanodiseerde aluminium lengteliggers met ingewerkte kabelgoot en met geïntegreerde rail, voorzien van vier kunststof accessoirehaken aan elke zijde.

Elektrische bedmanipulaties

- De elektrische functies kunnen geactiveerd worden d.m.v. een handschakelaar, een *mini-verpleegbox* (*), een *verpleegbox* (*) of *geïntegreerde bediening (DuoSafe onrusthekkens)* (*).
- Geïntegreerd weegsysteem, met een nauwkeurigheid van 100 gr volgens EN 45501:2015 in alle bedposities met extra geïntegreerde handbediening.*
- De bediening is voorzien van een voor-geprogrammeerde slaap- en relaxfunctie en bediening onderbedlicht (*).
- Een *mini-verpleegbox* (*), *verpleegbox* (*) en *geïntegreerde bediening (DuoSafe onrusthekkens)* (*) laten toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen.
- De optionele handschakelaar met selectieve blokkering (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen d.m.v. een magneetsleutel.

Paneeltypes

- Prime
- Jaro (enkel met Trix) (*)

Onrusthekkens

- Atmosphère (*)
- Trix (enkel met Jaro) (*)
- DuoSafe (*)

Accessoires


Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(*) Optie



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 98,6 cm¹, Lengte: 218 cm
 - Hoogtevariatie ligvlak: ± 41 cm - ± 81 cm
 - Veilig werkgewicht: 250 kg
 - Gewicht (zonder opties): 140 kg
 - Ligvlakmaat: 202 x 86 cm
 - Matrasmaat: 195 x 85 cm of 195 x 90 cm
- ¹ Breedte (met Jaro panelen): +2 cm

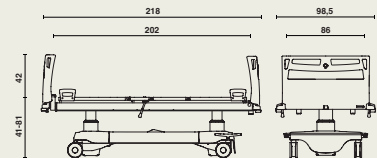

Materiaalgebruik en afwerking

- **Metaal:** epoxy-coating RAL 9006 alu, geanodiseerd aluminium, metaal.
- **Kunststof.**
- **Volkunststof.**
- Zelfsmurende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen** en **constructie**: zie onze materialenfiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Vaste serumhouders op onderwagen.
- Elektromechanische CRP.
- Dekenrek (niet mogelijk met mini-verpleegbox (ACC)).
- Handbediening met selectieve blokkering
- Handbediening met achtergrondverlichting.
- Sturing met Bluetooth.
- Draadloze handbediening voor sturing met Bluetooth.
- Mini-verpleegbox (ACC).
- Verpleegbox (ACO) incl. uitschuifbaar dekenrek.
- Geïntegreerd weegsysteem, met een nauwkeurigheid van 100 gr in alle bedposities.
- Haelvoet Connect Solutions.
- Laterale kanteling van het ligvlak (15°).
- DIN-rail aan hoofd- en/of voetenzijde (niet mogelijk met DuoSafe).
- Nachttlicht onder bed.
- Hoog/laag voetpedaal met valbescherming.
- 5de wiel.
- Rembuzzer.
- Muurafstandhouder.
- Gradenboog op ligkader en kniesteun
- Tweelingwielen $\varnothing 150$ mm met centrale rem (standaard bij geïntegreerd weegsysteem).
- Zuurstoffleshouder ($\varnothing 147$ mm, H 222 mm)



HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen. Nog niet beschikbaar voor commercialisatie.