



TechniCare
Improving Healthcare

Nascentia 2

Komfort, Benutzerfreundlichkeit und
Ergonomie für Mutter und Fachkraft



Nascentia 2 Gebärbett

Das Nascentia 2 Gebärbett ist ein komfortables und vollwertiges Pflege- und Gebärbett und damit die ideale Wahl für das Geburtssuite. Die schwangere Frau, die Gebärende und die Wöchnerin können während des gesamten Aufenthalts im selben Bett bleiben. Das Nascentia 2 Gebärbett bietet den Bedienkomfort eines vollwertigen Krankenhausbettes und berücksichtigt dabei alle möglichen Gebärhaltungen.

Mit nur einem Handgriff kann das Bett in ein Querbett umgewandelt werden, indem das Fußteil, der Gebärhocker, abgenommen wird. Dieser eignet sich für verschiedene Gebärhaltungen und kann von der Ärztin, dem Arzt oder der Hebamme als Sitzgelegenheit genutzt werden.



“Ich empfehle das Nascentia 2 wärmstens. Besonders das einfache Abkoppeln des Gebärhockers ist für uns sehr praktisch.”

Leitende Hebamme



Healing environment

Das Nascentia 2 wurde nach dem Healing-Environment-Konzept entwickelt, bei dem die Umgebung gezielt auf das Wohlbefinden der Mutter abgestimmt ist. Dies führt zu einer freundlichen Ausstrahlung und noch mehr Komfort.

nachhaltig

Das Nascentia 2 wurde durch und für die Geburtshilfe entwickelt.

Dank jahrelanger Zusammenarbeit mit verschiedenen Krankenhäusern entstand ein Bett mit einzigartigen Elementen.

Es ist ein 100% niederländisches Produkt und wird in den Niederlanden mit den nachhaltigsten und robustesten Materialien hergestellt. Die Matratze ist vollständig kreislauffähig und lässt sich einfach reinigen, indem sie abgespült wird – was zudem die Anschaffungs- und Wartungskosten reduziert.



Ergonomie

Die Grundlage des Gebärbettes ist die Ergonomie sowohl für die Mutter als auch für das Pflegepersonal. Alle Zubehörteile sind integriert.

Wir gewährleisten Ergonomie, indem wir das Bett mit ausreichend Infusionsständern, einer höhenverstellbaren Handgriffstange und einem elektrischen Antrieb ausstatten. So entlasten wir die Pflegekräfte, wodurch der Fokus weiterhin auf der Mutter liegen kann.



stark und robust

Das Nascentia 2 ist bekannt für seine Stärke und Robustheit. Wir verwenden nachhaltige Materialien wie Stahl, Edelstahl und Aluminium. Dies garantiert eine lange Lebensdauer und sorgt dafür, dass das Bett auch nach 15 Jahren noch einwandfrei funktioniert. TechniCare arbeitet mit Elektronik und Rädern von höchster Qualität, sodass Sie sich auf eine zuverlässige Wahl verlassen können.



“Das ideale Bett gab es nicht. Also haben wir beschlossen, es selbst entwickeln zu lassen.”

Tiba Spaapen,
Abteilungsleiterin OLVG



Zubehör



Infusionsständer
Zwei Stück, höhenverstellbar



Elektrischer Antrieb
Mit einem Finger zu bewegen



Handgriffstange
inklusive verstellbarem Griff



Fernbedienung
intuitive Bedienung



Griffe
klappbar



Beckenkippelement
elektrisch verstellbar




Kathetersackhaken
auf beiden Seiten



Bremssignal
bei eingestecktem Stecker



Höhenverstellung
mit elektrischer Fußschalter

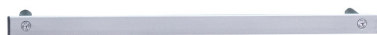

DIN-Schiene
auf beiden Seiten



Molton
in mehreren Farben erhältlich




Farben



TC Blue

Standard

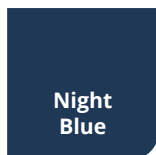

Night
Blue



Grey
Aluminium




Emerald
Green



Gold
Yellow

Technische Spezifikationen

Länge:	230 cm
Breite:	103 cm
Matratzenlänge:	200 cm
Matratzen-Trapezform	75 – 90 cm
Matratzenbreite:	90 cm
Matratzendicke:	14 cm
Höhenverstellbarkeit:	58 – 100 cm
Verstellbarkeit der Rückenlehne:	max. 80°
Verstellbarkeit des Beckenkippelements:	0 – 15°
SWL Bett:	250 kg
Trendelenburg-Position:	0 – 12°
Räder:	150 MM

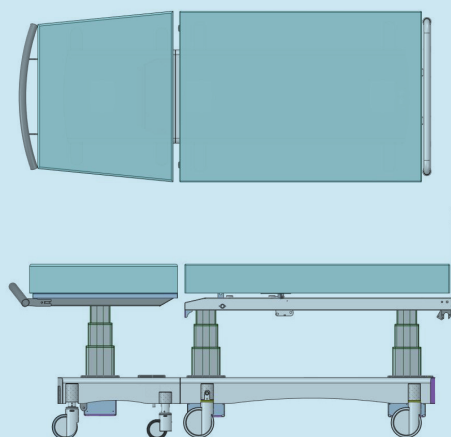

Improving Healthcare

TechniCare hat die Ambition, die Pflege durch technische Innovationen zu verbessern. Wir liefern hochwertige Qualitätsprodukte, die in Zusammenarbeit mit dem Endnutzer entwickelt wurden.

Wir sind ein niederländisches Unternehmen mit eigenen Entwicklungs- und Produktionsanlagen. Für weitere Informationen:

www.technicare.nl



Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)85 087 04 21
info@technicare.nl

www.technicare.nl