



ZENSO

relax zetel gamma

INHOUD

ZenSo collectie

De ZenSo collectie van Haelvoet is ontzettend veelzijdig, functioneel en biedt voor elke omgeving de meest geschikte zitoplossing.

THE STORY <i>Wat als... alles mogelijk is?</i>	03
ZENSO E-LIFT <i>Elektrisch met liftfunctie</i>	04
ZENSO E-MOVE <i>Elektrisch</i>	06
ZENSO ERGO-LINE / DUO-LINE <i>Manueel</i>	08
VEILIG OPSTAAN EN ZITTEN <i>E-lift mechanisme</i> <i>Raising & sitting assist</i>	10
MAKE IT YOURS <i>Configureer uw zetel</i>	12
ACCESSOIRES <i>Overzicht</i>	16
SERUMHOUDERS EN HULZEN <i>Ruime keuze</i>	17
ZENSO IN ACTIE	18



Haelvoet
Uitgave 2026
Haelvoet behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen.
Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk.

The Story

What if... anything is possible? ZenSo biedt het **meest complete gamma zorgzetels** van de markt aan.

RUIM GAMMA

Door een breed spectrum zetels aan te bieden - dat een perfecte mix vormt tussen functionaliteit, esthetiek en innovatie - wensen we maximaal aan alle behoeften tegemoet te komen.



EIGEN ONTWERPFILOSOFIE

Wat als... alles mogelijk is op alle zetels? Dankzij eigen ontwikkeling en productie kan snel en flexibel ingespeeld worden op diverse vragen en wensen. Zo zijn we er heel trots op dat de ZenSo zetel mogelijk is met **diverse manuele en elektrische relaxsystemen** al dan niet voorzien van een opstahulp. Een brede keuze aan wielen en afwerkingsmogelijkheden van armen en bekleding laat bovendien toe de zetel volledig te personaliseren.

FUNCTIONALITEIT & DUURZAAMHEID

Patiënten mobiliseren is van fundamenteel belang en daarom integreerde Haelvoet **ingenieuze opstahulpsystemen** in haar ZenSo gamma. De “raising & sitting assist” vergemakkelijkt dankzij een ondersteunende beweging van de zitting het opstaan én het neerzitten. Daarnaast is er ook het innovatieve E-lift mechanisme. Bij activatie van de E-lift functie treedt een automatisch remsysteem in werking. Vanuit deze veilige positie wordt de gebruiker geholpen van een zittende naar een staande positie of omgekeerd.



Haelvoet streeft naar een **circulaire economie** en ontwikkelt alle producten op een modulaire wijze. Hierdoor kunnen onderdelen gemakkelijk vervangen worden teneinde de levensduur van het product te verhogen. Bovendien zorgt de modulariteit dat het product kan mee evolueren met de wensen en behoeftes van de gebruiker.

ESTHETIEK

De ZenSo zetel koppelt ergonomie aan esthetiek en kan vele vormen aannemen. Dankzij de brede keuzemogelijkheden op vlak van armen, onderstel en afwerking, past de ZenSo zetel **zowel in thuis- als diverse zorgomgevingen**. Meer zelfredzaamheid creëren voor de gebruikers en ondersteuning bieden aan zorgverleners blijft onze drijfveer.

De ZenSo collectie bevindt zich op het kruispunt van twee werelden: when innovation meets design.





NEERSCHUIFBARE ARMEN
Vereenvoudigt transfers

CENTRALE REM
Activatie in 1 beweging

ZENSO E-LIFT

Ref. 19108

De ZenSo E-lift is een ideaal hulpmiddel voor personen met een (tijdelijk) verminderde mobiliteit. Door elektrische ondersteuning te bieden helpt de ZenSo zetel de gebruiker om zich zelfstandig in of uit de zetel te begeven. Dankzij de verhoogde zelfredzaamheid verhoogt het zelfvertrouwen of hebben patiënten sneller een perspectief op genezing.



Scan en bekijk hoe de **ZenSo E-lift** zetel een transfer vergemakkelijkt

E-LIFT

Maximale functionaliteit

- + Liftfunctie + automatische remfunctie
- + Elektrisch en tactiel
- + Handbediening of geïntegreerde bediening
- + Magnetische stroomconnectie zorgt voor een weggrijd- en struikelbeveiliging
- + Stroomloos inzetbaar dankzij de Li-ion batterij (*)



(*): Optie

KUNSTSTOF OPDEK
Eenvoudig in onderhoud

HUISELIJKE UITSTRALING
*Gestoffeerde armen en
geïntegreerde bediening*

ZENSO E-MOVE

Ref. 20052

Mensen moeten zich goed voelen in hun omgeving en daar kan een zetel een belangrijke rol in spelen. De ZenSo E-move zetel combineert een huiselijke uitstraling met comforteigenschappen die de zelfredzaamheid van de gebruiker verhogen en een hoog gebruiksgemak garanderen.

E-MOVE
Comfort en rust

- + Elektrisch en tactiel
- + Ruime keuze uit onderstellen
- + Handbediening of geïntegreerde bediening
- + Magnetische stroomconnectie zorgt voor een wegrijd- en struikelbeveiliging
- + Stroomloos inzetbaar dankzij de Li-ion batterij (*)

(*): Optie



Magnetische stroomconnectie



HUISELIJKE UITSTRALING
Gestoffeerde armen

OPEN VOET
Eenvoudig onderhoud

ZENSO ERGO-LINE

Ref. 19107

Een zetel dient toegankelijk en intuïtief in gebruik te zijn. Het Ergo-line relax mechanisme inclineert rug en beensteun simultaan en is eenvoudig zelf te bedienen door middel van een ergonomische hendel.

Synchrone beweging



- + Synchrone beweging rug- en beensteun
- + Raising & sitting assist (*)
- + Eenvoudig te bedienen d.m.v. één ergonomische hendel

ZENSO DUO-LINE

Ref. 20107

Het afzonderlijk verstelbaar mechanisme laat toe om de beensteun afzonderlijk van de rugsteun te verstellen bij het lezen of TV-kijken.

(*) : Optie

Afzonderlijk verstelbaar



- + Afzonderlijke verstelling rug- en beensteun
- + Raising & sitting assist (*)
- + Eenvoudig te bedienen d.m.v. twee ergonomische hendels

1. E-LIFT MECHANISME

De liftfunctie op de ZenSo E-lift zetel ondersteunt de gebruiker optimaal. De zetel remt automatisch dankzij het SafeBrake remsysteem.



AUTOMATISCH REMSYSTEEM

De **automatische remfunctie** zorgt ervoor dat bij het activeren van de opsta-functie, de wielen automatisch geremd worden (SafeBrake).




HANDBEDIENING OF GEÏNTEGREERDE BEDIENING

Keuze tussen **handbediening met spiraalkabel** of **geïntegreerde bediening** (enkel met gestoffeerde armsteunen).



2. RAISING & SITTING ASSIST

Dankzij de ondersteunende beweging van de “raising & sitting assist” wordt het zitten én opstaan vereenvoudigd.

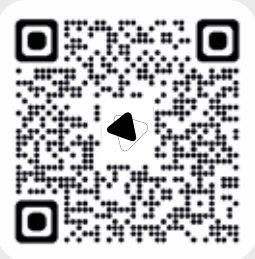

Scan en bekijk de raising & sitting assist op ZenSo Ergo-line

RAISING & SITTING ASSIST

Zowel de ZenSo Ergo-line als Duo-line zetel kan optioneel voorzien worden van een **raising & sitting assist** die eenvoudig met een extra hendel geactiveerd wordt. Door de ondersteunende beweging van de zit wordt het opstaan én het neerzitten extra ergonomisch ondersteund.



	ZENSO E-LIFT	ZENSO E-MOVE	ZENSO ERGO-LINE	ZENSO DUO-LINE	ZENSO RUSTZETEL
OPSTAHULPSYSTEEM					
E-lift mechanisme	●	×	×	×	×
Raising & sitting assist	×	×	○	○	×

● : Standaard ○ : Mogelijk × : Niet mogelijk



MAKE IT YOURS

Configureer de zetel volledig naar uw wens

De ruime keuze aan relaxmechanismes, onderstellen, wielen en afwerkingsopties laten toe om de zetel volledig af te stemmen op uw wensen en behoeftes.

1. RELAXMECHANISME

Maak een keuze uit de diverse types relaxmechanismes.

RELAX	Elektrisch	 Asynchrone en synchrone verstelling	ZENSO E-LIFT
			ZENSO E-MOVE
	Manueel	 Asynchrone verstelling	ZENSO DUO-LINE met raising & sitting assist
			ZENSO DUO-LINE
		 Synchrone verstelling	ZENSO ERGO-LINE met raising & sitting assist
			ZENSO ERGO-LINE
RUSTZETEL	Vast		ZENSO RUSTZETEL

2. ONDERSTEL

Afhankelijk van het gekozen relaxmechanisme zijn diverse onderstellen met of zonder wielen mogelijk.

		ZENSO E-LIFT	ZENSO E-MOVE	ZENSO ERGO-LINE	ZENSO DUO-LINE	ZENSO RUSTZETEL
ONDERSTEL						
	Lage voet	○	○	○	○	○
	Lage voet met wielen Ø 65 mm, individuele rem	×	○	○	○	○
	Hoge voet	○	○	○	○	○
	Hoge voet met wielen Ø 65 mm, individuele rem	×	○	○	○	○
	Wielen Ø 100 mm, individuele rem, met voetensteun	×	○	○	○	×
	Wielen Ø 100 mm, centrale rem op 2 wielen vooraan, individuele rem achteraan, met voetensteun	×	○	○	○	×
	Wielen Ø 100 mm, centrale rem op 4 wielen, met voetensteun	○	○	○	○	×

○ : Mogelijk × : Niet mogelijk


3. ARMSTEUNEN



NEERSCHUIFBARE ARMEN

Vereenvoudigen transfers

Neerschuifbare armsteunen (*) zijn mogelijk met **kunststof** of **houten** afwerking. De armsteunen zijn neerschuifbaar in 3 standen.

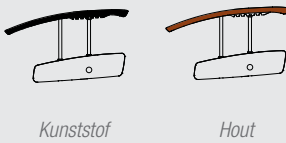

VASTE GESTOFFEERDE ARMEN

Maximale huiselijkheid

De gestoffeerde wangen zijn mogelijk **zonder opdek**, met **kunststof opdek** of met **houten opdek**.



(*): Niet mogelijk op ZenSo rustzetel

4. ZITHOOGTE EN ZITDIEPTE



Zithoogte*	Zitdiepte	Geschikt voor lichaamslengte
42,5 cm**	46 cm	< 164 cm
45 cm	46 cm	164 - 176 cm
45 cm	50 cm***	
47,5 cm	50 cm***	> 176 cm

(*): Zithoogte gemeten vanaf voetensteun (indien aanwezig)

(**): Niet mogelijk op ZenSo E-lift

(***): Niet mogelijk op ZenSo rustzetel

Accessoires

Diverse accessoires maken de ZenSo zetel compleet.



Afneembaar hoofd



Voorziening nekkussen



Nekkussen



Fixatiebeugel



Eettafelhouder



Elice eettafel



Bloedtransfusie arm I



Bloedtransfusie arm II



DIN rail



Bloedtransfusie arm III



Persoonlijk tafeltje



Accessoirehaken



Hoofdwas-unit



Anatomische reductor



Visco-elastische zitting



Zuurstoffleshouder

Serumhouders en -hulzen

Er zijn verschillende mogelijkheden per type onderstel.



RVS Serumhouder Ø 19 mm



RVS Serumhouder Ø 32 mm

	19 MM	32 MM
Serumhulzen i.f.v. type wielen		
Zonder wielen	×	×
Ø 65 mm	×	×
Ø 100 mm individueel geremd	●	×
Ø 100 mm centraal geremd vooraan	●	○
Ø 100 mm centraal geremd op 4 wielen	●	○

●: Standaard ○: Optie ×: Niet mogelijk

ZENSO

in actie

TELESCOPISCH BEENSTEUN

Bij inclinatie **verlengt de beensteun met 70 mm**. Deze functie zorgt voor een optimale ondersteuning van de benen en elimineert rimpels ter hoogte van de knieholtes die aan de basis kunnen liggen van decubitus.



VOLLEDIG AFNEEMBARE ZITTING EN BEENSTEUN

De zitting en beensteun zijn in **één geheel afneembaar** zonder gereedschap teneinde de zetel goed te kunnen reinigen. Bovendien is de onderzijde van de zitting en beensteun rondom gestoffeerd in dezelfde afwerking als de bovenzijde.

Een standaard zitting kan hierdoor uiterst snel vervangen worden door een anti-decubitus zitting / beensteun met visco-elastisch schuim (*).

REM EN RICHTINGSVASTZETTER OP VOORWIELEN

Een rem en richtingsvastzetter op de voorwielen van een zorgzetel zorgen voor extra stabiliteit, vlottere manoeuvres en minder fysieke belasting. Ideaal bij transfers en in krappe ruimtes: veilig voor de gebruiker, comfortabel voor de zorgverlener.



BRANDVERTRAGEND SCHUIM EN BEKLEDING

Het kwaliteitsschuim van de Haelvoet producten is **standaard brandvertragend tot in de kern** net zoals onze ruime kunstledercollectie.




Min. klasse: M2 (NFP 92.503) of BS5852 + CRIB 5. Schuim en bekleding voldoen aan EN1021-1 en EN1022-2. Kiezen voor Haelvoet is kiezen voor een veilig product.


Indien gewenst, zijn klantspecifieke oplossingen mogelijk passend bij de totaalinrichting van uw zorgomgeving.

EENVOUDIG ONDERHOUD ZONDER VERSCHUIVEN

Ook bij de ZenSo zetel zonder wielen met hoge voet kan het onderhoudspersoneel gemakkelijk onder het onderstel schoonmaken dankzij een **vrije hoogte van 13 cm**. Het ganse zetelgamma is door de weldoordachte vormgeving en gladde oppervlakken uiterst snel en eenvoudig te reinigen.

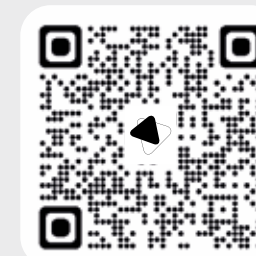

Scan en bekijk de transfer van zetel naar **ZenSo E-lift**

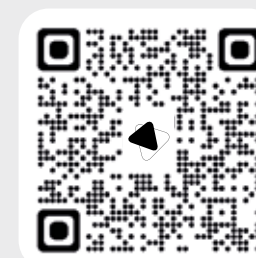

Scan en bekijk de transfer van **ZenSo E-lift** naar bed



Een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding gaat bij Haelvoet niet ten koste van het milieu, want Haelvoet draagt duurzaamheid - in beide betekenissen van het woord - hoog in het vaandel. Al onze producten hebben een lange levensduur en worden geleverd met 15 jaar garantie op constructiefouten.

De ZenSo zetels worden vervaardigd volgens ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016 en zijn in overeenstemming met de Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen en alle van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen:

EN 16139 : 2013 Meubelen - Sterkte, duurzaamheid en veiligheid - Eisen voor zitplaatsen voor niet-huishoudelijk gebruik.

EN 1728 : 2012 Meubelen - zitmeubelen - Beproevingsmethoden.


EN 1022 : 2005 Woonmeubelen - Zitmeubelen - Bepaling van de stabiliteit.



Dankzij onze moderne milieuvriendelijke productieprocessen, een maximaal gebruik van recycleerbare materialen en ons PEFC-certificaat betekent kiezen voor Haelvoet, kiezen voor een eerlijk en duurzaam product.



(*): Optie

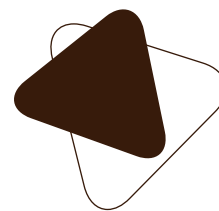

Haelvoet nv | **België**
Leon Bekaertstraat 8
B-8770 Ingelmunster
T +32 (0) 51 48 66 95

info@haelvoet.be
www.haelvoet.be

Haelvoet bv | **Nederland**
Schimminck 1
5301 KR Zaltbommel
T +31 (0) 88 599 05 99
F +31 (0) 88 599 05 00
info@haelvoet.nl
www.haelvoet.nl

Haelvoet sarl | **France**
130, Boulevard de la Liberté
59000 Lille
T +33 (0) 3 20 02 71 71
F +33 (0) 3 20 88 18 91
info@haelvoet.fr
www.haelvoet.fr

Haelvoet sa | **Suisse**
Route de la Plaine 45
1580 Avenches
T +41 (0) 26 675 46 86
F +41 (0) 21 560 46 46
info@haelvoet.ch
www.haelvoet.ch

Haelvoet srl | **Romania**
Parcul Industrial Jibou 1
455200 Jibou, Salaj
T +40 (0) 260 64 22 33
F +40 (0) 260 64 22 55
info@haelvoet.ro
www.haelvoet.ro