

Lago Care

16233 Lago Care kombiniert Sicherheit und Komfort tadellos. Eine niedrige Einstiegshöhe von ± 25 cm erhöht den Fallschutz. Eine ergonomische Arbeitshöhe von ± 80 cm garantiert eine effiziente Pflege.

Untergestell

- Äußerst stabile Höhenverstellung mittels Trägerarme.
- Trendelenburg und anti Trendelenburg Verstellung bis zu $\pm 16^\circ$.
- Versteckte Rollen $\varnothing 50$ mm mit Kunststoffabdeckungen, per 2 festgestellt.
- Design Pedal zur Aktivierung des Bremsmechanismus.
- Die gute Unterfahrbarkeit des Untergestells erhöht die Zugänglichkeit und Reinigungskomfort.
- Lifterunterfahrbar.
- Das Bett kann in jeder Position versetzt werden, die Sicherheitsposition ausgenommen (= niedrigste Position).

Liegefläche

- Drei- oder vierteilte (*) Liegefläche.
- Rückenlehne bis zu $\pm 70^\circ$ elektrisch verstellbar, mit Autoregression.
- Rücklehneverstellung mit Zwischenstopp bei einer Neigung von 30° . (wenn dies mit einer Schnellverstellung ausgestattet ist)
- Oberschenkellehne bis zu $\pm 34^\circ$ elektrisch verstellbar (für vierteilte Liegefläche).
- Unterschenkellehne manuell verstellbar zum Erreichen der Fowler-Position (für vierteilte Liegefläche).
- Beinlehne manuell bis zu $\pm 14^\circ$ verstellbar (für dreiteilte Liegefläche).
- Ein Sicherheitssystem vorbeugt dem Festsitzen des Patienten während einer elektrischen Manipulation
- der Liegefläche.
- Abgerundete Stahlprofile.
- Mit Halterungen für Fixierungsgurte ausgestattet.
- Rücken- und Unterschenkellehne mit 2 Matratzenbegrenzungen aus Kunststoff ausgestattet.
- Teleskopische Bettverlängerung um 20 cm (nicht möglich mit Pollux Seitengittern).
- 2 Hülsen zur Aufnahme von Infusionsständern oder Aufrichtevorrichtungen am Kopfende.
- Keine sichtbare Befestigungsbolzen an der Fußteilfüllung.
- Kopf- und Fußteilfüllung in massiver ofengetrockneter Buche (*).
- Abgerundete Bettecken erhöhen die passive

Elektrische Bettmanipulationen

- Die elektrischen Funktionen können mittels eines Handschalters aktiviert werden.
- Die Handbedienung ist mit einer vorprogrammierter Schlaffunktion ausgestattet.
- Die Handbedienung kann durch eine Tastenkombination gesperrt werden.
- Der Handschalter mit selektiver Verriegelung (*) ermöglicht es, die unterschiedlichen Funktionen mit einem Magnetschlüssel selektiv auszuschalten.

Teilfüllungen

- Midea (Standard)
- Valentino (*)
- Puro (*)
- Felina (*)
- Neo (*) / Lusso (*)

Seitengitter

- Pollux (*)
- Trix (*)
- Atmosphère (*)
- Twin (*)


Zubehör

Bitten Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.



Maße und Leistungen

- Breite: 100,5 cm, Länge: 208 cm
- Höhenverstellbarkeit der Liegefläche: ± 25 cm - ± 80 cm
- Unterfahrbarkeit: 137 mm (Höhe der Liegefläche 42 cm)
- Sichere Arbeitslast: 250 kg
- Gewicht (ohne Optionen): 140 kg
- Liegefläche: 204 x 86 cm
- Matratze: 195 x 85 cm, Dicke: 12 bis 15 cm
- Stand-by Verbrauch: 0,5 W (max. 4,38 kWh/Jahr).

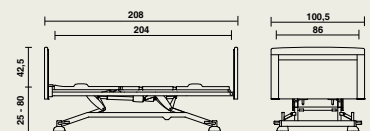

Materialien und Gestaltung

- Holz: Buche (massiv, Furnier), Spanplatte (melaminharzbeschichtet).
- Feuerhemmender Schaum.
- Metall: epoxybeschichtet RAL 9006 Aluminium.
- Selbstschmierende Kunststoffscharniere (= wartungsfrei).
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktion**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien. Reichhaltiges Angebot an **Farben**.

Optionen

- Vierteilte Liegefläche aus Stahl.
- Liegefläche mit herausnehmbaren Auflagen aus Vollkunststoff.
- Fußbendeverlängerung um 20 cm.
- Wandabweisrollen (nicht möglich mit Midea).
- Abstandshalter.
- Beleuchtete Handbedienung.
- Handbedienung mit selektiver Verriegelung.
- Steuerung mit Bluetooth.
- Drahtlose Handbedienung für Steuerung mit Bluetooth (für vierteilte Liegefläche).
- Leselampe.
- Batterie.
- Rollen $\varnothing 100$ mm, $\varnothing 125$ mm oder $\varnothing 150$ mm mit Bremsstange.
- Bremsenalarm (mit Zentralbremse).
- 5. Rolle (mit Rollen $\varnothing 150$ mm).
- Manuelle Schnellverstellung (CPR-Notabsenkung).
- Andere Breiten der Liegefläche: 90, 100 oder 110 cm.
- (Verriegelbare) abnehmbare Kopf- und/oder Fußteilfüllung (nicht kompatibel mit Trix- und Pollux-Seitengittern)
- Sauerstoffflaschenhalter ($\varnothing 147$ mm, H 222 mm)

(*) Option



HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE

Weil Haelvoet ständig technologische Fortschritte anstrebt, behält Haelvoet sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten vorzunehmen.